

# Catéter Duplo J Nonstone com Multi-Loop

## Revestimento hidrofílico facilita a introdução

O catéter duplo J Nonstone é biocompatível, radiopaco e feito de poliuretano a prova de dobras, o que permite drenagens de longos períodos sem deformações ou compressão do catéter. Possui revestimento hidrofílico o que reduz a fricção e resistência na sua introdução. O pigtail da extremidade distal é feito de várias voltas o que permite o uso do catéter para vários comprimentos diferentes de ureteres, além de possuir vários orifícios que proporcionam uma drenagem eficiente.


Acompanha fio guia, empurrador e clamp.

### Características:

- ✓ Revestimento hidrofílico facilita introdução;
- ✓ Marcação no corpo do catéter permite posicionamento correto;
- ✓ Vários orifícios drenam a urina com eficiência;
- ✓ Ponta afinada facilita o acesso ao rim;



Catéter Multi-Loop Nonstone

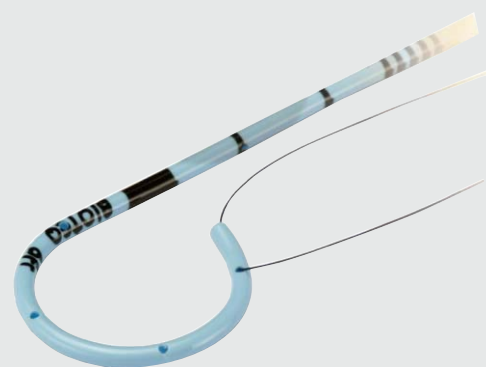

Com revestimento hidrofílico

### Catéter Duplo J Nonstone Multi Loop Caixa com 5

Número de catálogo	Catéter em Fr.	Tamanho em cm
BT-DJ-50ML	5	30
BT-DJ-60ML	6	30
BT-DJ-70ML	7	30
BT-DJ-80ML	8	30

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
[www.ecomed.com.br](http://www.ecomed.com.br)  
[ecomed@ecomed.com.br](mailto:ecomed@ecomed.com.br)

Representante