




Cateter de Drenagem Skater Multipropósito

Argon Medical Devices

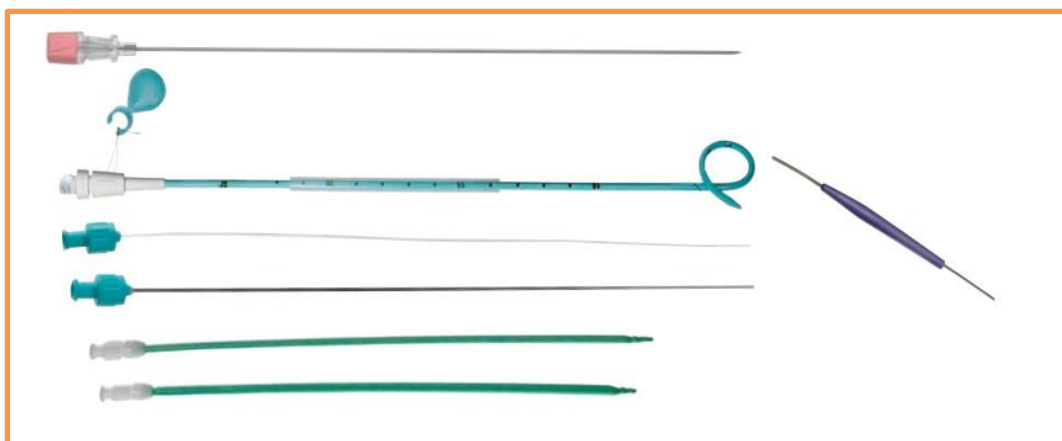

O Cateter de Drenagem Skater Multipropósito é um cateter de lúmen grande feito de poliuretano macio com grandes orifícios de drenagem. O cateter é composto por um retificador de ponta que é usado para endireitar a curvatura do pigtail na aplicação da cânula de reforço flexível ou de metal ao preparar o cateter para inserção, tem uma banda de tungstênio radiopaca proximal ao último orifício de drenagem para visualização. Os cateteres estão disponíveis com sistema de bloqueio que contém um fio de sutura de monofilamento de proteção com trava (corda).

Indicações de Uso

O Cateter de Drenagem Skater Multipropósito destina-se a drenagem utilizando a técnica Seldinger, para ser utilizado na drenagem geral (drenagem de cistos, abscessos, hematomas, exsudatos pleurais, pleuracenteses, paracenteses, ascite, vesícula e nefrostomias) e aplicações em drenagem biliar.

Características

- ❖ Kit composto com 01 cateter de drenagem Skater multipropósito, 01 agulha de punção, 01 Amplatz Fio Guia WORKER e Dilatadores;
- ❖ Revestimento hidrofílico SLIP-COAT™ na ponta distal para facilitar a inserção
- ❖ A agulha de punção 18G com estilete fornece acesso rápido para o fio amplatz WORKER™ forte, flexível e suave.
- ❖ Não contém látex.
- ❖ Todos os cateteres exceto o biliar possuem marcadores de posicionamento ao longo da tubulação do cateter principal

Aviso: Este dispositivo foi concebido, testado e fabricado para utilização uma única vez. A sua reutilização ou reprocessamento não foram avaliados e podem provocar mal funcionamento e subsequentemente doenças, infecções ou outros danos no paciente. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar este dispositivo.

Especificações e características técnicas

Componentes	Composição
Agulha de punção c/ estilete	Aço inoxidável 304; Copolímeros de estireno-butadieno, Polipropileno (verde, rosa, cinza ou marrom)
Amplatz fio guia WORKER™	Aço inoxidável 302/304 revestido c/ PTFE
Dilatador	HDPE verde; LDPE; Poliximetileno.
Cateter de Drenagem	Poliuretano c/ sulfato de bário - Poliuretano - Éster de celulose - Polivinilrolidona - Metil etil cetona - acetato de n-butilo - poliuretano c/ tungstênio - polietileno de baixa densidade - Silicone - monofilamento de Nylon - Acrilonitrilo butadieno estireno
Cânula metálica	Aço inoxidável 304 - Acrilonitrilo butadieno estireno.
Cânula flexível	Poliamida - Éster de celulose - Polivilrolidona

Validade: 5 anos

Esterilização: Óxido de Etileno

Cateter - Argon caixa com 05 unidades				
N° de Catálogo	Cateter de drenagem	Agulha de Punção	Amplatz fio guia WORKER™	Dilatador
757308000	8Fr x 35cm	18ga x 15cm	0.035'' x 90cm	6F e 7F
757310000	10Fr x 35cm	18ga x 15cm	0.035'' x 90cm	6F, 8F e 10F
757312000	12Fr x 35cm	18ga x 15cm	0.035'' x 90cm	6F, 8F, 10F e 12F

Reg. ANVISA n° 10337850106

